



東急ウェリナケア尾山台では
ご入居者の更なる安全・安心のため
最新の介護アシスト機器を導入しています。

介護アシスト機器

1

眠り SCAN

マットレスの下に敷いて人の体動を捉えることで、睡眠状態に加え、起き上がりや離床・在床および就床時の呼吸数をリアルタイムで確認できます。

マットレスの下に敷いて体の動きを捉え
スタッフのパソコンやスマートフォンに
ご入居者の睡眠状態などを
リアルタイムで表示できるシステムです。

1. 身体に何も装着することなくマットレスの下に敷くだけで
精度の高い睡眠状態が確認できます。
→ ・測定データの活用で、生活習慣の問題把握や対策の立案、効果の
確認がしやすくなります。
2. 居室での睡眠・覚醒・起き上がり離床・および就床時の呼吸数を
リアルタイムで確認できます。
→ ・ご入居者の睡眠を妨げない。
・スタッフの効率的な業務が行えます。




超低床ベッド

低床にすることで、ベッドからの転落を無くせます。
他にも、起き上がり時の体のズレを抑えられるなど多機能なベッドです。



高さ調整


15cm～55cm

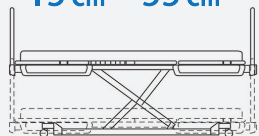

最も低い状態で床から15cm。万一転落した時の衝撃を緩和できます。
また、高さは55cmまでの調節ができ立ちあがりやケアする方にも配慮しました。




背足連動

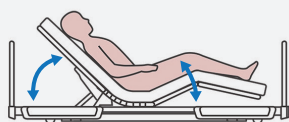

起き上がるときの体のズレを抑えて骨盤を起こし、安定して座ることができます。

背上げ


0°～75°

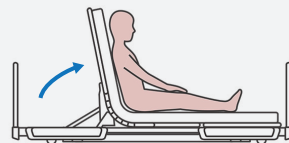

静かにスムーズに75°まで、無段階に背上げができます。

足上げ

0°～30°

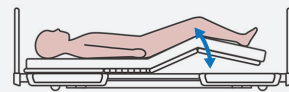


膝を上げた際の足先角度が、山なりと水平に切替ができることで、足のむくみを予防できます。

マットレス

- ・ストレッチグライドマットレス
- ・ストレッチスリムマットレス

優れた体圧分散性と構造で
床ずれ防止や安定した起き上がりの姿勢を叶えます。

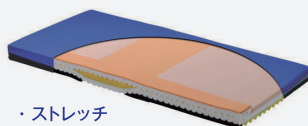


・ストレッチ
グライドマットレス

上層




+

下層

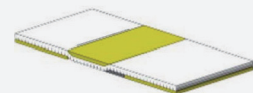

※ストレッチスリムマットは
グライドマットレスの下層と
同機能です。

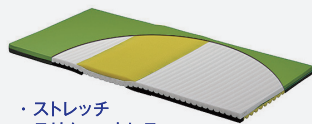

・ストレッチ
スリムマットレス

床ずれを防止

性質の異なるウレタンフォームを2層追加し、
静止型マットレスで最高クラスの体圧分散性。

寝ている時


寝返りが打ちやすい
身体が動きやすい自然な寝姿勢



腰部と大腿部を支えて、
荷重のかかる臀部は
やわらかい素材で
浮かせるように
支える構造

起きる時

身体のズレを軽減

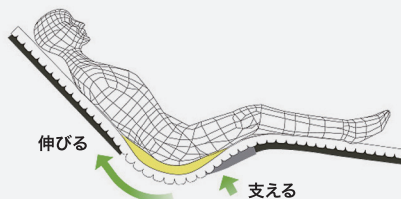

ベッドの
背上げに合わせて
マットレスが伸び
身体のズレを軽減

